

Newsletter



La società americana FDA con nota del 17 aprile 2014 sconsiglia l'utilizzo del morcellatore laparoscopico nella maggior parte degli interventi di isterectomia e miomectomia per il rischio inatteso di disseminazione neoplastica.

La letteratura, seppur in maniera diversa da studio a studio, evidenzia la possibilità di incidenza di patologia maligna inattesa (Seidman et al. PLOS: 1.2% dei casi, FDA: 1:352 sarcoma e 1:498 LMS, AAGL abstract: lo studio Portland stima un'incidenza del 4 or 6%, Ob/Gyn: 2.7% rischio di neoplasia inaspettata). Le stessa società di riferimento AAGL e SEGI raccomandano l'utilizzo di devices dedicati per la morcellazione intracavitaria a sistema chiuso, per minimizzare il rischio di dispersione tissutale. Per tale motivo nasce MorSafe. Un dispositivo medico monouso innovativo pensato per essere utilizzato come contenitore e isolatore durante le procedure ginecologiche laparoscopiche quali miomectomie o isterectomie. MorSafe può essere abbinato al Sistema VERSATOR per la morcellazione dei tessuti per contenere e rimuovere il tessuto morcellato. Il dispositivo presenta caratteristiche uniche che gli permettono un facile rilascio in cavità, una facile insufflazione, morcellazione e una tenuta ermetica nella fase di recupero del contenitore-isolatore MorSafe. Utilizzare MorSafe significa prevenire la dispersione di tessuti nella cavità peritoneale durante le procedure di morcellazione laparoscopica.

VERSATOR®

Per una morcellazione sicura



M⊕RSAFE™
TISSUE ISOLATOR

La soluzione per la morcellazione in sicurezza dei tessuti durante le
procedure laparoscopiche



www.veolmedtech.com

Morcellazione Sicura... ora una realtà...

Laparoscopia

Sono ben noti e largamente accettati dalla comunità medica i benefici derivanti dall' approccio laparoscopico. Nel caso di una isterectomia o di una miomectomia laparoscopica, evitare una incisione addominale laparotomica porterà ad una guarigione più veloce, con meno dolore post-operatorio, un minor rischio di infezioni, e pertanto un ritorno alle normali attività quotidiane più veloce.

La morcellazione dei tessuti, effettuata in abbinamento con un dispositivo di isolamento e contenimento del tessuto, è uno dei più importanti benefici ottenuti nelle procedure laparoscopiche.

Versator + MorSafe = una soluzione vincente

Il morcellatore di tessuti Versator è un prodotto unico in quanto parzialmente monouso. Esso, infatti, permette di morcellare utilizzando un manipolo monouso leggero e, al contempo, potente grazie ad un cavo-rotore riutilizzabile fino a 10 volte.

L'isolatore MorSafe è progettato e proprio per le procedure di morcellazione ottenendo dei benefici unici e non replicabili da altri prodotti disponibili sul mercato. Utilizzando MorSafe quindi, si potrà prevenire la dispersione di tessuti nella cavità peritoneale durante le procedure di morcellazione laparoscopica.

Il morcellatore di tessuti Versator e l'isolatore MorSafe utilizzati insieme offrono la migliore qualità per la cura della paziente. E finalmente, per la prima volta, sarete sicuri di morcellare grandi quantità di tessuto efficacemente e velocemente a una velocità superiore e, cosa più importante, in totale sicurezza.



...Morcellazione Sicura

* Covered by various national and international approved and pending patents.

VERSATOR[®] MANIPOLO



Profilo della lama "Core Guard"
per una maggiore sicurezza del paziente



CUT Mode



CUT PLUS Mode



MANIPOLO

Posizioni sulla ghiera

Il morcellatore di tessuto VERSATOR, è un dispositivo monouso unico in quanto reusable, perchè consiste di una componente monouso e una componente parzialmente riutilizzabile. Il sistema comprende un **manipolo monouso**, che sarà a contatto con i tessuti e il **cavo-rotore** che trasmette energia al manipolo. Il cavo-rotore è sterilizzabile fino a 10 volte. Questa versatile combinazione garantisce benefici nel rapporto costo/efficacia dello strumento.



**Sistema di aggancio/sgancio rapido
Manipolo/Rotore**

Reusable

Il cavo-rotore è sterilizzabile fino a 10 volte, il manipolo è monouso

Veloce

Taglio rapido del tessuto con una velocità massima di **2000 rpm**

Leggero

Il manipolo VERSATOR è ergonomico, leggero e semplice da utilizzare.




ROTOR

VERSATOR® CENTRALINA

La centralina VDU consente al manipolo VERSATOR di approssicare e morcellare in modo efficiente qualsiasi tessuto per via laparoscopica.

Le sue caratteristiche salienti sono:

- **Eccellente efficacia nei tessuti calcificati:** l'elevata coppia motrice della centralina e la lama affilata sul manipolo assicurano un taglio facile e regolare anche nei miomi più calcificati.
- **Ergonomico:** l'impugnatura e la disposizione ergonomica dei controlli di taglio, un display intuitivo e l'attivazione a pedale, assicurano una procedura meno faticosa
- **Facile da utilizzare:** una semplice e facile interfaccia (display) abbinata a una veloce e facile connessione con il manipolo aiutano l'utilizzatore a rendere più agevole la procedura.
- **Alta Velocità:** La centralina consente la selezione di ben 8 livelli di velocità favorendo un miglior controllo nella morcellazione ed una maggiore efficacia
- **Alta qualità dei materiali:** l'utilizzo dei migliori materiali assicura una lunga durata e una migliore affidabilità nel corso degli anni di utilizzo.

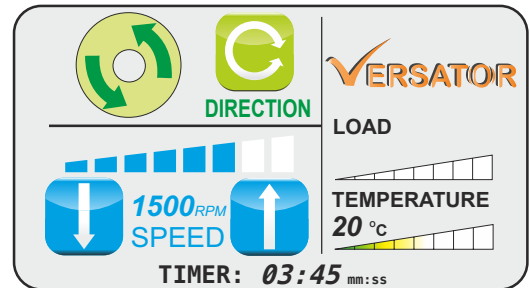

Interfaccia Grafica Utente

FACILE

Facile utilizzo tramite un'interfaccia/display touch-screen

SICURO

Protezione automatica di sicurezza contro i sovraccarichi

SMART

Funzione **timer** procedurale

POTENTE

L'**elevata coppia motrice** garantisce sempre la potenza sufficiente per ogni tipologia di tessuto.




MorSAFE™

TISSUE ISOLATOR

MorSafe™ è un innovativo dispositivo medico monouso pensato per essere utilizzato come contenitore e isolatore durante le procedure ginecologiche laparoscopiche quali miomectomie o isterectomie.

MorSafe™ può essere abbinato al Sistema VERSATOR per la morcellazione dei tessuti per contenere e rimuovere il tessuto morcellato.

Il dispositivo presenta caratteristiche uniche che gli permettono un facile rilascio in cavità, una facile insufflazione, morcellazione e una tenuta ermetica nella fase di recupero del contenitore-isolatore MorSafe.

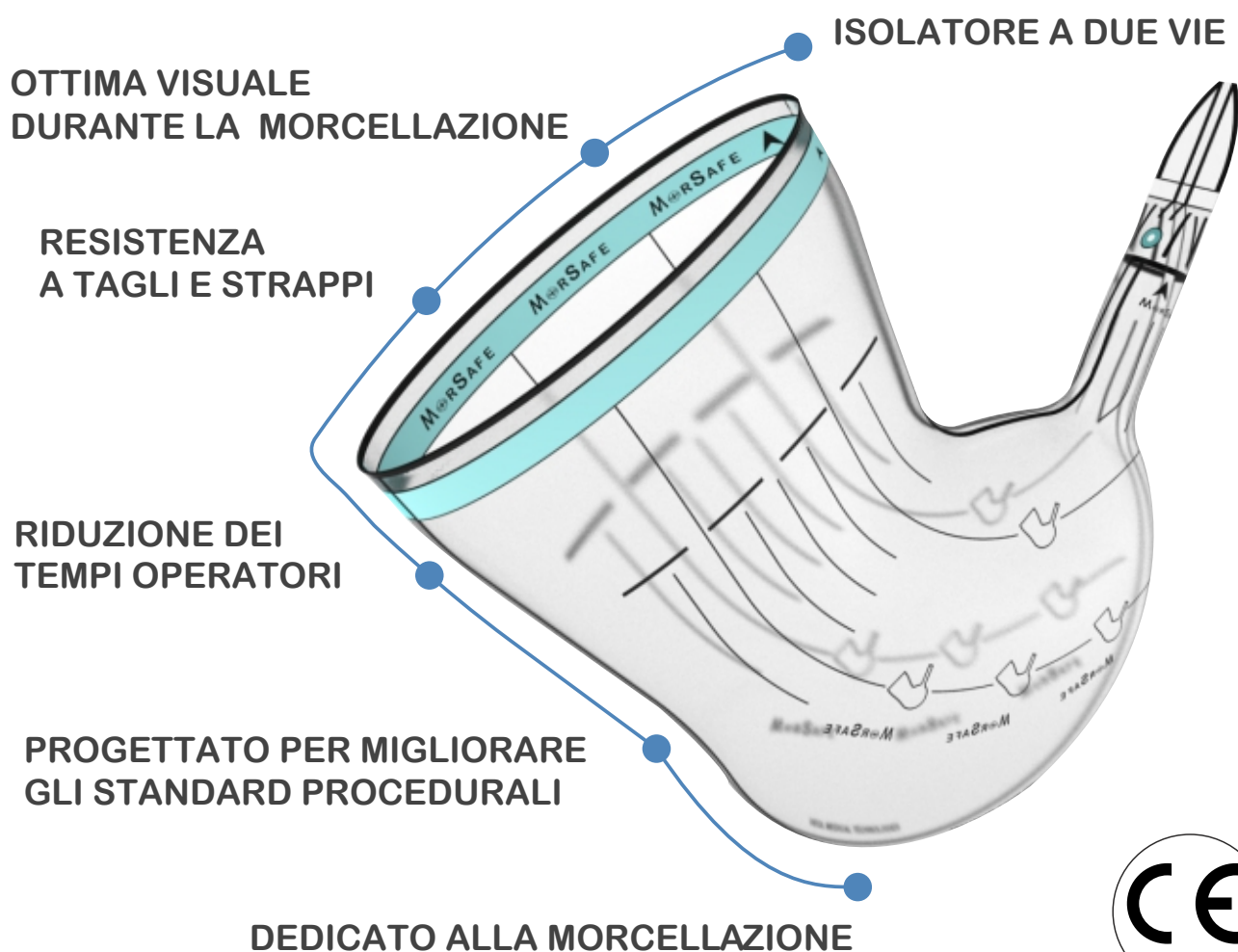

Il prodotto numero 1 al mondo specifico per una morcellazione sicura

SISTEMA PER UNA MORCELLAZIONE SICURA

Un kit procedurale perfetto ...

Il sistema per una morcellazione sicura comprende una centralina (VDU), un manipolo monouso, un cavo-rotore riusabile 10 volte, un otturatore poliuso e un contenitore-isolatore monouso con il suo introduttore dedicato.

MANIPOLO	
Velocità di taglio	200 - 2000 RPM
Diametro di taglio	15 mm
Modalità di taglio	CUT, CUT PLUS, OFF
Peso	150 g
CONTENITORE-ISOLATORE	
Accessi	2
Capacità	Small: 1600 CC Medium: 2100 CC Large: 2600 CC

VDU	
Velocità	200 - 2000 RPM
Dimensioni	345 x 215 x 110 mm
Potenza	110-240 VAC, 350 Watts
Peso	4 Kg
ROTORE	
Camicia Rotore	Lunghezza: 2000 mm
Peso	250 g
Compatibile con Gynecare Drive Unit	

Guida all'acquisto

Codice	Descrizione	Conf.
--------	-------------	-------

Versator - Morcellatore Monouso

VDU	Morcellatore Versator Kit comprendente: n° 1 centralina, n° 1 pedaliera, n°1 cavo di alimentazione	1
VR0030	Manipolo Versator diam. 15 mm sterile e monouso, completa di riduttore per strumentario da 5 mm	1
VR0034	Rotore Versator, non sterile, riusabile 10 volte	1
VR0035	Otturatore in acciaio per manipoli Versator diam. 15 mm, non sterile, riusabile	1

Moresafe - Isolatore per la morcellazione in ambiente chiuso dei miomi

XG01S	Isolatore Morsafe per la morcellazione in ambiente chiuso dei miomi, monouso, sterile - Misura Small - capacità 1.600 cc - conf. 5 pz	1
XG01M	Isolatore Morsafe per la morcellazione in ambiente chiuso dei miomi, monouso, sterile - Misura Medium - capacità 2.100 cc - conf. 5 pz	1
XG01L	Isolatore Morsafe per la morcellazione in ambiente chiuso dei miomi, monouso, sterile - Misura Large - capacità 2.600 cc - conf. 5 pz	1